

## Installationsbeschreibung **apokompass**

Folgende Installationsvoraussetzungen MÜSSEN erfüllt sein:

**Unbedingt vorher prüfen, ob das jeweilige Service Pack vorhanden ist!**

- Unterstützte Betriebssysteme:
  - **Windows 10 – empfohlen**
  - **Windows 8 / 8.1**
  - **Windows Server 2008 - Windows Server 2012**
  - **Windows 7 mit Service Pack 1**

**Aus Sicherheitsgründen sollten immer alle verfügbaren Service Packs und Windows Sicherheitsupdates installiert sein.**

- Freier Speicherplatz auf Laufwerk C:\ bzw. auf dem Systemlaufwerk:
  - **Datenbank Server > 2,5 GB**
  - **apokompass > 400 MB**
- Computer mit mindestens 4GB RAM, Auflösung mindestens: 1024 x 768
- Zur Installation benötigen Sie Administrationsrechte
- In den Betriebssystemen Windows 7, 8 und 8.1 ist es ggf. notwendig vor der Installation das **.NET Framework 4.6.2** oder höher zu installieren.

### **Die Installation besteht aus drei Schritten**

#### **Schritt 1: Installation **apokompass****


Wenn apokompass auf mehreren Computern genutzt werden soll, empfehlen wir die apokompass Anwendung von einem Computer auf ein Netzlaufwerk zu installieren oder den Installationsordner freizugeben und von dort die Desktop Verknüpfungen auf alle weiteren Computer zu erstellen.

Laden Sie zunächst unter dem FTP-Link

<ftp://apotest:apotest@ftp.gfi-bremen.de/ApoCD-XL/setup462.exe>

das apokompass Anwendung herunter.

Starten Sie die heruntergeladene Anwendung mit einem Doppelklick

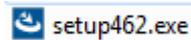

Folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm.

Wenn apokompass auf mehreren Computern genutzt werden soll, erstellen Sie jetzt die Desktop Verknüpfungen (vom Netzlaufwerk/Freigabe) zu der Anwendung  Apo-CD XL.exe auf den weiteren Arbeitsplätzen.

## Schritt 2: Einmalige Installation des Datenbank Servers

Laden Sie den MS-SQL-Server unter dem FTP-Link

<ftp://apotest:apotest@ftp.gfi-bremen.de/ApoCD-XL/2014/SQL-2014-x64.zip>

von unserem Server herunter (Zip-Datei ca. 1,1 GB) und entpacken die Zip-Datei.

Die Apothekendaten & Images werden in der **zentralen** Datenbank gespeichert, so dass von mehreren Arbeitsplätzen auf denen **apokompass** installiert oder verknüpft ist auf die Daten zugegriffen werden kann. Dies sollte möglichst ein leistungsfähiger Computer sein. Starten Sie mit einem Doppelklick die Anwendung



Klicken Sie auf den Button



Die Installation kann je nach Rechner/Festplattengeschwindigkeit bis zu ca. 30 Minuten dauern. Beachten Sie auch die Sicherheitsabfrage der Benutzerkontensteuerung Ihres Betriebssystems, die evtl. in der Taskleiste  aufblinkt. Nach erfolgreicher Installation können Sie mit Schritt 3 fortfahren.

**Schritt 3: Daten/Online Key-CD einspielen (einmalig)**

1. Legen Sie die „**CD Daten Key**“ in das CD/DVD Laufwerk
2. Starten Sie **apokompass** und vergeben Sie zunächst ein Passwort für den Benutzer „**Administrator**“
3. Klicken Sie in der Anmeldemaske auf den Button



3. Um den/die Key(s) einzuspielen, klicken Sie auf den Button



4. Dies wiederholen Sie bitte mit der „**CD Online Key**“.
5. Fertig!

**Bei weiteren Fragen oder Problemen steht Ihnen unsere Hotline gerne zur Verfügung.**

Mo. bis Do. 8 - 16 Uhr und Fr. 8 - 13 Uhr

Telefon 0421 - 57 62 126

hotline@narz-avn.de